

INVACARE[®] CANADA TRIPORTEURS ET QUADRIPORTEURS



Yes, you can.[®]



Yes, you can.®

Les scooters Invacare® ont été conçus par une équipe d'ingénieurs et de cliniciens qui ont pris en compte les commentaires des utilisateurs quotidiens et occasionnels. Résultat : une famille de scooters qui correspond à toutes les exigences en matière de rendement, de conception et de confort.

Présentant tout ce que les scooters intérieurs micro portables et extérieurs très robustes de 485 lb peuvent comporter, la gamme de scooters Invacare Canada est sans précédent, car elle offre et présente une solution répondant à tous les besoins.

Évalué à l'établissement de classe mondial certifié TÜV en Allemagne, les scooters Invacare ont été homologués comme sécuritaires, fonctionnels et de bonne qualité. Ils ont été reconnus pour leurs fiabilités apportant la tranquillité d'esprit et pour leurs très grandes durées de vie.



Invacare® Canada triporteurs et quadriporteurs

Colibri™ avec 3 et 4 roues micro portable

Un scooter compact idéal pour les endroits intérieurs, les visites au centre commercial, les promenades au parc ou en escapade les fins de semaine.

Leo™ avec 3 et 4 roues de taille moyenne

Le scooter intérieur et extérieur idéal. Compact et suffisamment agile pour vous promener à l'intérieur tout en vous offrant tous les avantages liés au confort qu'un scooter extérieur peut vous offrir.

Pegasus^{METRO} avec 3 et 4 roues

Modèle extérieur très ergonomique doté des caractéristiques de sécurité avancées.

Pegasus^{PRO} avec 4 roues

Ses caractéristiques de conception élevée comprennent un écran LCD riche en renseignements, une suspension améliorée et un endroit pour accueillir de grosses batteries lors de longs voyages.

Comet^{PRO} avec 4 roues

Un système de suspension unique et des pneus larges idéaux pour s'attaquer aux terrains extérieurs difficiles.

Comet^{ULTRA} PRO très résistant avec 4 roues

Un modèle robuste pouvant supporter un grand poids et doté d'un siège large de 26 po ainsi que de réglage de support lombaire pneumatique.





reddot award 2014
winner

Colibri™ avec 3 et 4 roues micro portable

Numéros du modèle :

	3 roues avec des piles de 12 Ah	4 roues avec des piles de 12 Ah	4 roues avec des piles de 18 Ah
Orange	COLIBRI3O-12	COLIBRI4O-12	COLIBRI4O-18
Rouge	COLIBRI3R-12	COLIBRI4R-12	COLIBRI4R-18
Blanc	COLIBRI3W-12	COLIBRI4W-12	COLIBRI4W-18
Vert	COLIBRI3G-12	COLIBRI4G-12	COLIBRI4G-18
Bleu	COLIBRI3B-12	COLIBRI4B-12	COLIBRI4B-18
Argenté	COLIBRI3S-12	COLIBRI4S-12	COLIBRI4S-18

Le Colibri d'Invacare® est le compagnon de voyage idéal. Caractérisé par une durabilité sans pareil, il a été amélioré grâce à la technologie brevetée LiteLock™ afin que vous soyez en mesure de le démonter facilement. Il représente la solution idéale pour les visites au centre commercial, les promenades au parc ou bien pour faire des escapades les fins de semaine. Standard, comprend des batteries et supporte jusqu'à 300 lb.

Caractéristiques

- Trois plateformes possédant différentes roues et options de piles : Trois roues de 200 x 50 avec des piles 12 Ah, quatre roues de 200 x 50 avec des piles de 12 Ah ou quatre roues de 210 x 65 avec des piles de 18 Ah.
- La technologie brevetée LiteLock™ vous permet de l'assembler et de le démonter facilement pour le transporter et lors des voyages.
- Choix de six couleurs pour les panneaux interchangeables afin de personnaliser le Colibri et de l'adapter à votre propre style.
- Durable, roues noires à deux rayons et panier avant en composite.
- Colonne de direction réglable, trois positions avec guidon Delta.
- Le siège du conducteur rembourré en vinyle est doté de larges appuis-bras et de coutures aux accents stylisés dont les angles et la hauteur peuvent être ajustés.
- Options de piles doubles 12 Ah et 18 Ah pour un chargement frontal pratique et une autonomie de déplacement de 16 km.
- Électronique programmable du fournisseur pour inverser la direction de l'accélérateur et pour ajuster le rendement de conduite.
- Les dispositifs de sécurité standards intégrés incluent des dispositifs anti-basculement arrière, des bandes réfléchissantes avant et arrière et un levier de desserrement du frein.
- Capacité pondérale : 300 lbs.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Caractéristiques des triporteurs / quadriporteurs Colibri™



Choix de six couleurs pour les panneaux.

Personnalisez votre scooter grâce à un choix de six couleurs interchangeables. Choisissez entre argent diamant, orange pierre de soleil, vert jade, jaspe rouge, bleu saphir ou blanc marbre.



Technologie LiteLock™

Le système breveté LiteLock de Colibri vous permet de retirer facilement le boîtier à piles pour désengager le mécanisme de verrouillage afin de démonter facilement le scooter en composantes facilement transportables.



Confortable et réglable

La barre à trois positions et les poignées de commandes delta vous assurent d'être dans une position confortable pour conduire tout comme les caractéristiques du siège du conducteur et les larges appuis-bras à angles ajustables dotés de coutures aux accents stylisés.



Dispositifs de sécurité standards

Les scooters Colibri sont tous munis de roulettes arrière antibascules, de réflecteurs avant et arrière ainsi que d'un levier manuel de désengagement des freins. L'armature renforcée du scooter augmente sa capacité à voyager quotidiennement.



Deux options de pneus et de piles

Jantes noires élégantes à doubles rayons installées sur des pneus à profil bas non marquant offertes en 200 x 50 et en 210 x 65. Les deux batteries de 12 et de 18 Ah peuvent être chargées sur le scooter ou ailleurs et vous permettent de parcourir une distance allant jusqu'à 16 km.



Cinq composantes légères

Siège de 22 lbs
Avant avec 3 roues, 29 lbs
Avant avec 4 roues, 34 lbs
Arrière de 21 lbs
Bloc-batterie 12 Ah, 22 lbs
Bloc-batterie 18 Ah, 32 lbs
Panier de 1,45 lbs

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.



Leo à 3 et à 4 roues intérieur et extérieur

Numéros du modèle :

	3 roues	4 roues
Bleu	LEO-3B	LEO-4B
Rouge	LEO-3R	LEO-4R
Argenté		LEO-4S

Offert en plateformes de 3 et de 4 roues, le scooter Leo est idéal pour l'intérieur et l'extérieur en raison de sa taille compacte et à longue portée. Puisque le scooter Leo a été conçu soigneusement afin qu'il soit sécuritaire, fonctionnel et de grande qualité, il représente le choix optimal pour les personnes qui tiennent à leur indépendance. Il possède des caractéristiques telles que les poignées de commandes delta et un système d'éclairage DEL avant à deux ampoules intégrées. Sa barre et son siège ajustables et confortables vous assureront un déplacement en toute sécurité et dans un environnement confortable. Comprend des batteries 36 Ah.

Caractéristiques

- Les batteries standards 36 Ah vous permettent de parcourir une distance atteignant 36 km.
- Démontez-le à la main en cinq pièces légères pour le transporter.
- Sa taille compacte vous permet de le déplacer et de le contrôler facilement.
- Les dispositifs anti-éclaboussures intégrés protègent le moteur et les composantes électroniques.
- Pneus gonflables noirs de 10 po avec jantes polies en aluminium
- Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d'empêcher les désengagements accidentels en mode conduite.
- La hauteur du siège rotatif à 360 degrés peut être ajustée et celui-ci comprend de larges appuis-bras à angle ajustable possédant des coutures aux accents stylisés.
- Système d'éclairage complet. Lumières LED efficaces qui augmentent la visibilité et offrent une plus grande amplitude d'usage.
- Électronique programmable du fournisseur pour inverser la direction de l'accélérateur et ajuster le rendement de conduite.
- Barre infiniment ajustable dotée de poignées de commandes ergonomiques delta.
- Facile à utiliser, tableau de bord avec éclairage et signaux visuels et sonores programmables.
- Les ports doubles arrière permettent d'utiliser plusieurs accessoires en même temps.
- Capacité pondérale : 350 lbs.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Caractéristiques des triporteurs / quadriporteurs Leo



Capacité de réglages infinis de la colonne de direction

L'angle de la barre s'ajuste facilement pour offrir une position de conduite confortable et pour voir le tableau de bord et y accéder facilement.



Siège confortable

Le siège à hauteur ajustable est doté de larges appuis-bras à angle ajustable. Il peut être avancé ou reculé et possède un angle de rotation de 360 degrés. Les deux ports pour accessoires permettent d'utiliser deux accessoires arrière au besoin.




Lumières de freins/Indicateurs

Les lumières des freins arrière s'allument au relâchement de l'accélérateur. Les indicateurs de direction gauche et droit arrêtent automatiquement de clignoter après 30 secondes.



Tableau de bord « intuitif »

Conçu pour un usage facile et précis avec boutons sous forme de dômes, éclairage LED et signaux auditifs ainsi qu'un indicateur de piles qui permet d'afficher la puissance restante.

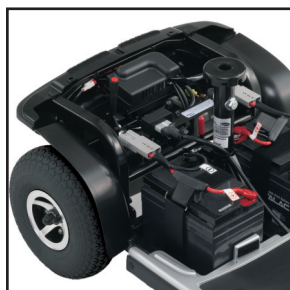

Dispositifs anti-éclaboussures intégrés

Les dispositifs anti-éclaboussures permettent de protéger le moteur et les composants électroniques et aident à limiter l'entretien.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.



Pegasus^{METRO} avec 3 et 4 roues pour l'extérieur

Numéros du modèle :

	3 roues	4 roues
Bleu	PEGASUS3M-B	PEGASUS4M-B
Rouge	PEGASUS3M-R	PEGASUS4M-R
Argenté	PEGASUS3M-S	PEGASUS4M-S
Blanc	PEGASUS3M-W	PEGASUS4M-W
Vert	PEGASUS3M-G	PEGASUS4M-G

Les scooters Pegasus^{METRO} avec 3 et 4 roues possèdent beaucoup de caractéristiques conçues pour que vous ayez une expérience de conduite extérieure remarquable. La technologie de réduction de la vitesse du propriétaire vous permet de vous attaquer aux courbes en toute sécurité. Le METRO possède aussi un tableau de bord intuitif avec des signaux visuels et sonores ainsi que des électroniques programmables pour qu'il soit très facile à contrôler.

Caractéristiques

- Technologie de réduction de la vitesse d'Invacare.
- Sa conception ergonomique permet d'aligner efficacement la tête, les épaules et les coudes pour obtenir une position de conduite détendue.
- La barre peut constamment être ajustée entre 70 et 90 degrés.
- Le moteur à 4 pôles offre un rendement fiable et une vitesse maximale de 12 km.
- Système d'éclairage avant et arrière complet avec lumières automatiques pour freins, clignotants et phares à deux ampoules très lumineuses.
- Tableau de bord intuitif avec boutons surélevés, indicateurs DEL et signaux sonores programmables permettant une utilisation facile et concise.
- La hauteur du siège du conducteur avec contours peut être ajustée, celui-ci possède des options d'inclinaison à positions multiples améliorées et il peut être reculé ou avancé. L'angle de ses larges appuis-bras peut être ajusté.
- Électroniques programmables du fournisseur.
- Pare-chocs avant et arrière pour une meilleure durabilité.
- Le système de suspension à ressorts avant et arrière réglables vous permet de vous déplacer en toute douceur, même sur des terrains accidentés.
- Pneus gonflables noirs de 11 po avec jantes polies en aluminium.
- Un levier désenclenchement deux étapes permet d'éviter tout désenclenchement non-désiré du mode de conduite.
- Le moteur et les électroniques sont protégés contre la corrosion et l'eau afin de protéger le fonctionnement vital du scooter.
- Les ports doubles arrière permettent d'utiliser plusieurs accessoires en même temps.
- Capacité pondérale : 300 lbs.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.



Pegasus^{PRO} avec 4 roues pour l'extérieur

Numéros du modèle :

Couleurs classiques

Bleu PEGASUS4P-B

Rouge PEGASUS4P-R

Argenté PEGASUS4P-S

Blanc PEGASUS4P-W

Vert PEGASUS4P-G

Couleurs de qualité supérieure

Bleu Électrique PEGASUS4P-EB

Rouge Carmin PEGASUS4P-CR

Chrome Emblématique PEGASUS4P-IC

Beige Luxor PEGASUS4P-BG

Crystal Cuivré PEGASUS4P-CC

Le Pegasus^{PRO} est une grande actualisation du Pegasus^{METRO} et possède une garniture de haut niveau pour les conducteurs distingués souhaitant monter d'un cran leur expérience de conduite. Muni d'un affichage LCD rétro-éclairé, le PRO vous renseigne constamment sur le rendement du scooter lorsque vous conduisez. De plus, grâce à la capacité de batterie améliorée, à ses roues très larges et à sa nouvelle suspension à doubles triangles, le Pegasus^{PRO} est la solution idéale pour les personnes à la recherche d'un scooter possédant un rendement et des fonctionnalités de haute qualité.

Caractéristiques

- Un écran LCD interactif : Le centre d'information du scooter affiche l'heure, la température, la jauge de la batterie, les messages du système, l'odomètre et l'indicateur de vitesse.
- Électroniques programmables, volumes des signaux sonores ajustables et éclairage de l'écran LCD configurable.
- Technologie de réduction de la vitesse d'Invacare.
- Sa conception ergonomique permet d'aligner efficacement la tête, les épaules et les coudes pour obtenir une position de conduite détendue.
- La barre peut constamment être ajustée entre 70 et 90 degrés.
- Le moteur à 4 pôles offre un rendement fiable et une vitesse maximale de 15 km.
- Système d'éclairage avant et arrière complet avec lumières automatiques pour freins, clignotants et phares à deux ampoules très lumineuses.
- La hauteur du siège du conducteur avec contours peut être ajustée, celui-ci possède des options d'inclinaison à positions multiples améliorées et il peut être reculé ou avancé. L'angle de ses larges appuis-bras peut être ajusté.
- Pare-chocs avant et arrière renforcés pour augmenter sa durée de vie.
- Suspension à triangles à double articulation verticale pour fournir un contrôle, un rendement et un confort de qualité supérieure.
- Pneus gonflables noirs de 12 po avec jantes polies en aluminium.
- Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d'empêcher les désengagements accidentels en mode conduite.
- Le moteur et les électroniques sont protégés contre la corrosion et l'eau afin de protéger le fonctionnement vital du scooter.
- Capacité pondérale : 350 lbs.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.



Comet^{PRO} avec 4 roues pour l'extérieur

Numéros du modèle :

Couleurs classiques		Couleurs de qualité supérieure	
Bleu	COMET4P-B	Bleu Électrique	COMET4P-EB
Rouge	COMET4P-R	Rouge Carmin	COMET4P-CR
Argenté	COMET4P-S	Chrome Emblématique	COMET4P-IC
Blanc	COMET4P-W	Beige Luxor	COMET4P-BG
Vert	COMET4P-G	Crystal Cuivré	COMET4P-CC

Les scooters à quatre roues Comet^{PRO} vous offre puissance et rendement dans un ensemble de qualité supérieure. Rassemblant de larges pneus gonflables de 13 po avec sa suspension à triangles avant de haute qualité et sa suspension à ressort arrière centrale, le Comet^{PRO} est idéal pour s'attaquer aux terrains extérieurs. Le Comet^{PRO} comprend aussi un écran LCD interactif vous donnant des renseignements sur votre vitesse, le pourcentage restant de votre batterie, l'heure, la température et les messages du système

Caractéristiques

- Un écran LCD interactif : Le centre d'information du scooter affiche l'heure, la température, la jauge de la batterie, les messages du système, l'odomètre et l'indicateur de vitesse.
- Électroniques programmables, volumes des signaux sonores ajustables et éclairage de l'écran LCD configurable.
- Technologie de réduction de la vitesse d'Invacare.
- Sa conception ergonomique permet d'aligner efficacement la tête, les épaules et les coudes pour obtenir une position de conduite détendue.
- La barre peut constamment être ajustée entre 70 et 90 degrés.
- Le moteur à 4 pôles offre un rendement fiable et une vitesse maximale de 15 km.
- Système d'éclairage avant et arrière complet avec lumières automatiques pour freins, clignotants et phares à deux ampoules très lumineuses.
- La hauteur du siège du conducteur avec contours peut être ajustée, celui-ci possède des options d'inclinaisons à positions multiples améliorées et il peut être reculé ou avancé. L'angle de ses larges appuis-bras peut être ajusté.
- Pare-chocs avant et arrière renforcés pour augmenter sa durée de vie.
- Suspension à triangles à double articulation verticale pour fournir un contrôle, un rendement et un confort de qualité supérieure.
- Pneus gonflables noirs de 13 po avec jantes polies en aluminium.
- Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d'empêcher les désengagements accidentels en mode conduite.
- Le moteur et les électroniques sont protégés contre la corrosion et l'eau afin de protéger le fonctionnement vital du scooter.
- Capacité pondérale : 350 lbs.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.



COMET4HDU-G

Comet^{ULTRA} avec 4 roues pour l'extérieur

Numéros du modèle :

Couleurs classiques		Kit de couleurs de qualité supérieure	
Bleu	COMET4HDU-B	Bleu Électrique	1637418
Rouge	COMET4HDU-R	Rouge Carmin	1637417
Argenté	COMET4HDU-S	Chrome Emblématique	1637419
Blanc	COMET4HDU-W	Beige Luxor	1637415
Vert	COMET4HDU-G	Crystal Cuivré	1637416

Le Comet^{ULTRA} a été conçu dans le but d'être confortable, stable et sécuritaire. Sa construction robuste peut soutenir jusqu'à 485 livres et est dotée d'un siège large de 26 po. Son système de suspension unique peut s'ajuster pour réduire la vibration et augmenter le plaisir de conduire. L'^{ULTRA} incorpore une base et une colonne pour le siège ainsi que des appuis-bras renforcés pour offrir un support fiable lorsque l'utilisateur embarque et débarque du scooter.

Caractéristiques

- Le siège du conducteur avec contours, large de 26 po et doté d'un support lombaire pneumatique a été conçu avec des thérapeutes pour assurer une position assise optimale et pour augmenter le confort.
- Un écran LCD interactif : Le centre d'information du scooter affiche l'heure, la température, la jauge de la batterie, les messages du système, l'odomètre et l'indicateur de vitesse.
- Électroniques programmables, volumes des signaux sonores ajustables et éclairage de l'écran LCD configurable.
- Technologie de réduction de la vitesse d'Invacare.
- Sa conception ergonomique permet d'aligner efficacement la tête, les épaules et les coudes pour obtenir une position de conduite détendue.
- La barre peut constamment être ajustée entre 70 et 90 degrés.
- Le moteur à 4 pôles offre un rendement fiable et une vitesse maximale de 10 km.
- Système d'éclairage avant et arrière complet avec lumières automatiques pour freins, clignotants et phares à deux ampoules très lumineuses.
- Pare-chocs avant et arrière renforcés pour augmenter sa durée de vie.
- Suspension à triangles à double articulation verticale pour fournir un contrôle, un rendement et un confort de qualité supérieure.
- Pneus gonflables noirs de 13 po avec jantes polies en aluminium.
- Le levier de relâchement des freins à deux étapes permet d'empêcher les désengagements accidentels en mode conduite.
- Robust motor and electronics that are protected from corrosion and water, to safeguard the vital workings of the scooter.
- Capacité pondérale : 485 lbs.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Caractéristiques des scooters Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO} et Comet^{ULTRA}



Tableau de bord LCD intuitif Pegasus^{METRO}

Conçu pour être utilisé facilement et avec précision, doté de boutons surélevés, de lumières DEL, de signaux sonores et d'un indicateur de batterie lumineux affichant le pourcentage de batterie restante.



Tableau de bord LCD Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO}, Comet^{ULTRA}

L'écran LCD affiche la vitesse, la distance parcourue, le pourcentage restant de la batterie, l'heure, la température et les messages du système. La luminosité de l'écran et le volume des signaux sonores du panneau peuvent être ajustés grâce au tableau de bord.



Conduite ergonomique

La conception de la barre et des poignées delta favorisent un alignement optimal de la tête, des épaules et des coudes. Les ajustements infinis de la barre entre 70 et 90 degrés permettent de placer le corps dans une position de conduite détendue, diminuant ainsi les tensions et augmentant le confort.



Suspension avancée

Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO}, Comet^{ULTRA}

Suspension avant à triangles à double articulation verticale pour fournir un contrôle, un rendement et un confort de qualité supérieure. Agencé avec une suspension ajustable de l'armature arrière, ce système avancé vous offre une conduite en douceur, une traction améliorée et une stabilité de haute qualité pour rouler sur divers terrains.



Technologie de réduction de la vitesse

Assurez le contrôle optimal de votre scooter grâce à la technologie de réduction de la vitesse (TRV) exclusive qui permet le ralentissement de l'unité dans les courbes.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Caractéristiques des scooters Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO} et Comet^{ULTRA}



Électronique programmable

Les scooters Invacare sont entièrement programmables par un technicien du fournisseur pour l'ajustement le rendement de conduite, la vitesse maximale, les minuteurs de mise en veille et les signaux sonores. La direction de l'accélérateur peut aussi être inversée grâce à un programmeur.



Siège confortable

Le siège à hauteur ajustable est doté de larges appuis-bras à angle ajustable. Il peut être avancé ou reculé et possède un angle de rotation de 360 degrés. Le siège du Comet^{ULTRA} est large de 26 po et a été amélioré grâce à un support lombaire pneumatique. Les deux ports pour accessoires permettent d'utiliser deux accessoires arrière.



Lumières pour freins/Clignotants

Les lumières pour freins arrière ont permis d'améliorer la sécurité et la visibilité du scooter, car ils s'allument aussitôt que l'accélérateur est relâché et les clignotants gauches et droits arrêtent de clignoter automatiquement après 30 secondes.



Levier manuel de désengagement des freins à deux étapes

Empêche le relâchement accidentel en mode conduite.



Composantes fiables

Le moteur et la boîte de vitesses ont largement été testés pour assurer leur fiabilité et leur durabilité.



Supports de transport sécuritaires

Les supports de transport soudés à l'armature offrent quatre points pour sécuriser votre scooter lors des déplacements.

Options d'enveloppe



Options de couleurs classiques pour enveloppe PegasusMETRO, PegasusPRO, CometPRO & CometULTRA



Rouge Jasper



Vert Jade



Diamant Argenté



Blanc Marbre



Bleu Saphir

Options de couleurs de qualité supérieure pour enveloppe PegasusPRO & CometPRO



Crystal Cuivré



Chrome
Emblématique



Rouge Carmin



Bleu
Électrique



Beige Luxor



Polygon Dusk



Polygon Sunrise



Hexagon Moguls

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Accessoires



Boîte frontale de rangement

Mettez vos objets importants dans le boîtier avant verrouillable. Capacité 10 lb/4,5 kg.

ACC260 (argenté), ACC270 (bleu),
1551638 (rouge), 1537710 (gris ardoise)
Leo, Pegasus, Comet & Comet HD
1637910 (gris charbon)
Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO} & Comet^{ULTRA}



Boîte de rangement arrière verrouillage

S'installe sur les ports arrière pour accessoires du scooter pour obtenir de l'espace de rangement supplémentaire.

1637913
Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO} & Comet^{ULTRA}



Panier avant très grand

S'installe sur le devant de la barre pour tripler l'espace du panier comparé au panier en composite classique. 10,5 po de H x 17,75 po de l x 10,5 po de D

1637915
Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO} & Comet^{ULTRA}



Panier arrière

Grand panier arrière idéal pour ranger toutes vos affaires. 8 po large x 13 po profond x 7 po haut.

ACC230
Conçu pour tous les scooters.
Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter 1148158. Comet très résistant et le Comet^{ULTRA} doivent posséder le tube de rallonge pour scooter 1541502.



Pare-chocs avant et arrière en acier

Se fixe de manière sécuritaire sur le scooter pour ajouter une protection supplémentaire à l'armature et à l'enveloppe.

1528275 - Avant - 3W Pegasus, Pegasus^{METRO}
1638965 - Avant - 4W Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}
1528298 - Avant - Comet, Comet^{PRO}, Comet^{ULTRA}
1638966 - Arrière - Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}
1638967 - Arrière - Comet^{PRO}, Comet^{ULTRA}



Ensemble de miroirs de luxe

Miroirs avant stylisés à fixer sur le côté gauche et droit du tableau de bord. Vendus en pair.

1637911
Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri.



Miroir classique

Le miroir amovible est réglable et peut être installé sur le côté droit ou gauche du tableau de bord. Vendu séparément.

ACC250
Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri.



Porte-boisson

Porte-verre avec pince RAM Level Cup™
TAGHCUP (gauche) Conçu pour tous les scooters.
Porte-verre pliable. S'installe sur la pochette pour barre.

1521594 (droite)
Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri et le Leo.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Accessoires



Support à téléphone mobile

Supports robustes et sécuritaires s'ajustant pour supporter la plupart des téléphones intelligents.

1637912

Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri.



Chargeur USB

Se connecte dans le chargeur des scooters pour charger un appareil mobile.

1637917

Pegasus^{METRO}, Pegasus^{PRO}, Comet^{PRO} & Comet^{ULTRA}



Drapeau de sécurité

Ce drapeau de 6 po, orange vif, permet de voir le triporteur/ quadriporteur de loin. Est livré avec un support de montage sécuritaire.

ACC140

Conçu pour tous les scooters.

Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter 1148158. Comet très résistant et le Comet^{ULTRA} doivent posséder le tube de rallonge pour scooter 1541502.



Porte-canne /béquille

Permet de transporter en toute sécurité et de garder à portée de main une béquille ou canne pendant les voyages.

ACC200

Conçu pour tous les scooters.

Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter 1148158. Comet très résistant et le Comet^{ULTRA} doivent posséder le tube de rallonge pour scooter 1541502.



Marchette

Gardez à l'abri une marchette ou un déambulateur à roulettes lorsque vous vous déplacez.

ACC210

Conçu pour tous les scooters.

Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter 1148158. Comet très résistant et le Comet^{ULTRA} doivent posséder le tube de rallonge pour scooter 1541502.



Support pour bouteille à oxygène

Assure l'entreposage d'une bouteille à oxygène de taille D lors du transport.

ACC220

Conçu pour tous les scooters.

Le Colibri doit posséder le support à accessoire pour scooter 1148158. Comet très résistant et le Comet^{ULTRA} doivent posséder le tube de rallonge pour scooter 1541502.



Pare-brise

S'installe sur les supports du miroir en utilisant les miroirs ou le matériel inclus pour le fixer.

1543160

Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri.

LE STYLE EST ÉTERNEL. SCOOTERS INVACARE.

Accessoires



Sac pour dossier

S'installe facilement sur le siège du scooter pour obtenir de l'espace de rangement supplémentaire.

PRC571720 (gauche) / 1505731 (droite)

Conçu pour tous les scooters sauf pour le Colibri et le Leo.



Suspension du siège

S'installe sur le support du siège pour se déplacer en douceur.

1577212 (Bas) / 1577213 (Moyen) / 1577214 (Haut) - Colibri

1541628 (Bas) / 1541629 (Moyen) - Leo

1640428 (Bas) / 1640430 (Moyen) / 1640448 (Haut)

Comet^{PRO} to 201 lbs.

1640429 (Bas) / 1640447 (Moyen) / 1640449 (Haut)

Comet^{PRO} to 285 lbs.

1640422 (Bas) / 1640424 (Moyen) / 1640426 (Haut)

Pegasus^{Metro/Pro} to 201 lbs.

1640423 (Bas) / 1640425 (Moyen) / 1640427 (Haut)

Pegasus^{Metro/Pro} to 285 lbs.



Housse pour triporteur/quadriporteur

Nylon noir, robuste, résistant aux intempéries

PRC571840 - Colibri & Leo

1518240 - Pegasus, Pegasus^{Metro/Pro}, Comet, Comet^{PRO}

Housse pour siège

Protège le siège contre la saleté de la pluie et de la saleté.

1521684 (aucune illustration) - Pegasus, Pegasus^{Metro/Pro}, Comet, Comet^{PRO}



Veste de visibilité améliorée pour assurer la sécurité

Veste de sécurité très réfléchissante.

Taille unique.

SP1521592



Système d'attache pour accessoires

S'attache de manière sécuritaire à l'armature du siège du Colibri pour permettre d'utiliser un accessoire arrière.

1148158 (gauche)

Tube de rallonge

Le tube à accessoire permet de prolonger la longueur du Comet très résistant et du Comet^{ULTRA} pour permettre d'utiliser les accessoires fixés à l'arrière du scooter.

1541502 (droite)

Spécifications du produit

	Colibri 3W 12Ah/ 4W 12Ah/4W 18Ah	Leo 3W/4W	Pegasus 3W/4W METRO	Pegasus 4W PRO	Comet 4W PRO	Comet 4W ULTRA Pro
Dimensions hors tout	19.25"	23.6"	26"	25.5"	26"	26"
Largeur de la base	1.75"/1.75"/3"	2.4"/2.5"	3"	4"	4"	4"
Hauteur maximale des obstacles pouvant être surmontés	40"	47.5"	49"/50"	52"	57"	57"
Longueur	34.1"	36"	49.5"	49.5"	49.5"	50.75"
Hauteur	18"/12"/12"	22"/13"	23"/13"	13"	13.5"	13.5"
Longueur d'espace pour pieds d'utilisable						
Dimensions du siège						
Distance siège-sol	14.5" - 16.5"	16.5" - 19.5"	17.25" - 20.25"	17.25" - 20.25"	17.25" - 20.25"	17.25" - 20.25"
Largeur	17"	19"	20"	20"	20"	26"
Profondeur	17.5"	16"	18.5"	18.5"	18.5"	22.5"
Hauteur du dossier	15.5"	18.5"	27" - 29"	27" - 29"	27" - 29"	32" - 35"
Angle de dossier	N/A	N/A	90° - 130°	90° - 130°	90° - 130°	95° - 130°
Dimensions appuis-bras						
Longueur	11.5"	14"	14"	14"	14"	14"
À partir du siège au sommet des appuis-bras	8"	8"	7" - 10"	7" - 10"	7" - 10"	5" - 7"
Largeur entre les appuis-bras	16" - 19"	23" - 27"	20" - 22.5"	20" - 22.5"	20" - 22.5"	20" - 22.5"
Batteries recommandées	2 x 12 V, 12 Ah* / 2 x 12 V, 18 Ah*	2 x 12 V, 36 Ah*	2 x 12 V, 40 Ah	2 x 12 V, 75 Ah Group 24	2 x 12 V, 75 Ah Group 24	2 x 12 V, 75 Ah Group 24
Système de chargement à l'extérieur des panneaux	2 Ah/2 Ah/5Ah	5 Ah	8 Ah	8 Ah	8 Ah	8 Ah

*Inclut les batteries

Spécifications du produit

	Colibri 3W 12Ah/ 4W 12Ah/4W 18Ah	Leo 3W/4W	Pegasus 3W/4W METRO	Pegasus 4W PRO	Comet 4W PRO	Comet 4W ULTRA Pro
Vitesse	8 km/h (5 mph)	8 km/h (5 mph)	12 km/h (7.5 mph)	15 km/h (9.5 mph)	15 km/h (9.5 mph)	10 km/h (6 mph)
Autonomie estimée*	11 km (7 miles) / 11 km (7 miles) / 16 km (10 miles)	36 km (22 miles)	42 km (26 miles)	55 km (34 miles)	55 km (34 miles)	58 km (36 miles)
Poids limite (lb.)	300**	350**	300**	350**	350**	485**
Angle d'inclinaison maximum	6°	6°/8°	6°	10°	10°	10°
Pneus						
Dimensions	200 x 50 / 200 x 50 / 210 x 65	9" x 3.5"	11" x 3.5" 4.10/3.50-5	12" x 3.5" 3.50-5	13" x 4" 4.00-5	13" x 4" 4.00-5
Pression des pneus	N/A	50 psi	50 psi	50 psi	50 psi	50 psi
Poids (lbs.)	91.6 / 97.4 / 108 (inc. batteries)	174/184 (inc. batteries)	114/125	172	185	212

Garantie Garantie limitée de deux ans contre les défauts de fabrication (excluant les matériaux rembourrés et doublés, les pneus et les roues). Garantie de six mois sur les batteries achetées à Invacare®. La garantie du fabricant ne s'étend pas à l'usure normale.

*La distance de voyage est uniquement basée sur les normes ISO 7176-2 déterminées lors des essais effectués avec un mannequin de 220 lb/100 kg. La distance de voyage dépend du poids de l'utilisateur, de la vitesse, de la sorte de batterie et de son état, du niveau de charge, des conditions climatiques, du terrain et de l'état des roues motrices.

**La limite de poids est le poids maximal total que pèse le conducteur, les accessoires et les articles supplémentaires qu'il peut transporter. Exemple : Si le poids limite du scooter est de 350 lb et que les articles supplémentaires pèsent au total 25 lb, le conducteur peut peser au maximum 235 lb.



Yes, you can.[®]

Invacare Canada LP
www.invacare.ca

Canada
570 Matheson Blvd. E.
Unit 8
Mississauga, Ontario
L4Z 4G4 Canada
(800) 668-5324

Tous droits réservés.
Les marques déposées sont
identifiées
par les symboles TM, SM et
®. Toutes les
marques déposées sont la
propriété de,
ou utilisées sous licence
par, Invacare
Corporation, à moins d'avis
contraire.

Les spécifications peuvent
être sujettes à
des changements sans
notification préalable.

© 2019
Invacare Canada
Form No. 09-736C
Rev 03/19